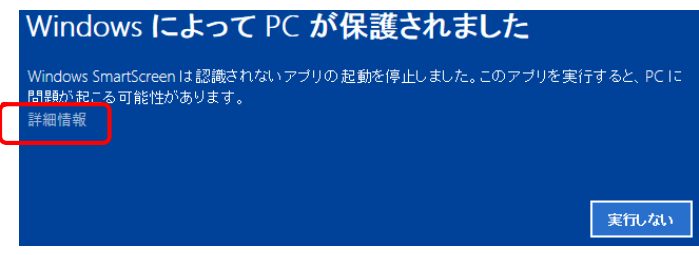
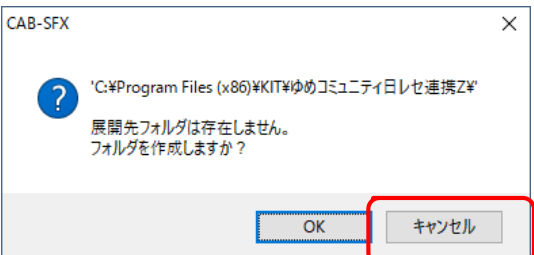
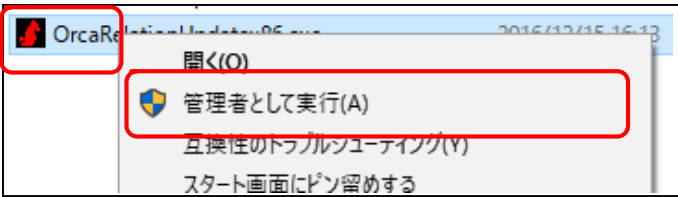


日レセ連携ツールの更新手順

<p>1. タスクトレイから赤い犬のマークを探し、右クリックをします。</p>	<p>2. 終了を選択し、日レセ連携ツールを一旦終了します。</p>
	
<p>3. ゆめ病院へログインし、ヘルプボタンを押します。</p>	<p>4. ご使用の環境に合わせた更新ファイルを選択します。 (32bit/64bit 見分け方 をご参照下さい。)</p>
	
<p>5. 保存、又は実行を選択します。</p>	<p>6. ダウンロードしたファイルを実行すると、展開先の指定画面が現れるので OK ボタンを押します。</p>
	 <p>うまくこの画面にならない場合次ページもご参照下さい。</p>
<p>7. 上書きで「はい」を選択して下さい。</p>	<p>8. 更新後に日レセ連携ツールを起動し、自動名寄せの項目が表示されていれば、更新が成功しています。</p>
	

日レセ連携ツールの更新手順（トラブルシューティング）

<p>* 1. 以下のような表示で実行が停止される場合、詳細情報をクリックすると実行することが出来ます。</p>	<p>* 2. 下記のような表示が出る場合、32bit64bit 見分けが間違えている場合があります。キャンセルの後やり直して下さい。</p>
 <p>Windows SmartScreen は認識されないアプリの起動を停止しました。このアプリを実行すると、PCに問題が起こる可能性があります。</p> <p>詳細情報</p> <p>実行しない</p>	 <p>CAB-SFX</p> <p>'C:\Program Files (x86)\KIT\ゆめコミュニティ日レセ連携Z'</p> <p>展開先フォルダは存在しません。 フォルダを作成しますか？</p> <p>OK キャンセル</p>
<p>* 3. 更新後も自動名寄せの項目が表示されていない場合、ファイルの上書きが失敗しています。ダウンロードフォルダを開き、更新ファイルを「管理者として実行」をお試しください。</p>	
 <p>OrcaRelationalUpdater95.exe 2016/12/15 16:13</p> <p>開く(O)</p> <p>管理者として実行(A)</p> <p>互換性のトラブルシューティング(Y)</p> <p>スタート画面にピン留めする</p>	